


產品結

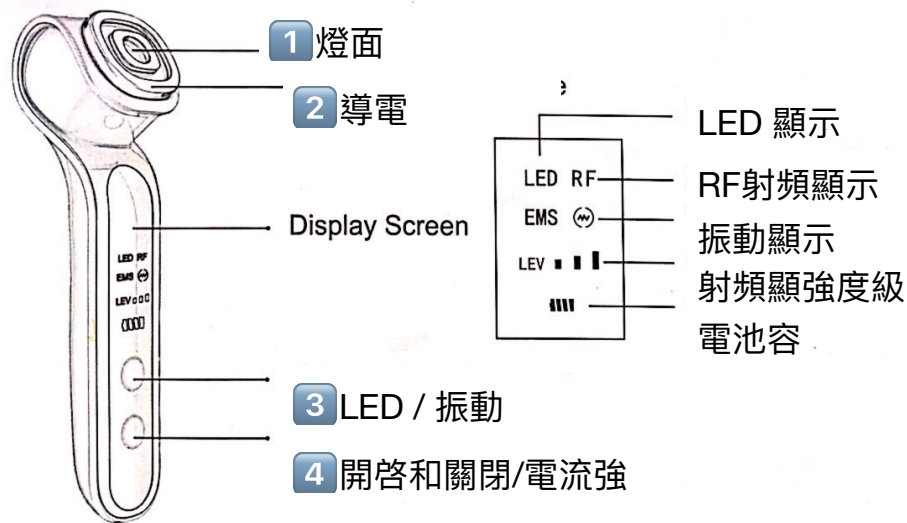

如何操作

*何時充電

電池指示燈開始閃爍並在電源開啟時發出警告蜂鳴聲，表示電池電量不足，然後設備將自動關閉。

- 電源/電流強度鍵

按 4 鍵電源鍵約 3 秒為設備供電。藍燈 2 亮，同時電流強度為第一級，自動開啟震動功能。同時，顯示屏的所有指示燈均亮。

- 電流強度有 3 個不同級別可供選擇。

按 4 鍵一次，電流強度變為第二級。

按 4 鍵兩次，電流強度變為第三級。

按 4 鍵三次，電流強度變為二級。 •LED 鍵/振動鍵

輕按 3 鍵，LED 燈模式關閉

按 3 鍵約 3 秒可關閉振動模式

功能.LED

-藍色波長-415nm
卓越的美容效果，改善敏感



-紅色波長-630nm
刺激皮膚細胞分泌膠原蛋白，使質地緊緻



-綠色波長-525nm
抗衰老，撫平皺紋和細紋



-青色CYAN 波長 490nm
減輕炎症、中和、平衡和穩定皮膚



-黃色 波長 -590nm
淡化黑斑、雀斑和瑕疵



-紫色 波長 - 390nm
改善淋巴代謝、微循環，改善粉刺



-白色WHITE-MIX
放鬆，恢復更年輕、更健康的皮膚



- 有七種不同的 LED 模式可供擇。
 - 設備開啟藍燈亮著
- 輕按 3 鍵一次LED 變紅光
輕按 3 鍵二次 LED 變綠光
- 輕按 3 鍵三次LED 變青光
輕按 3 鍵四次LED 變黃光
輕按 3 鍵五次LED變紫光
輕按 3 鍵六次LED變白光
輕按 3 鍵七次LED變回藍光。

使用方法

警告事項

請勿在同一位置長時間連續使用設備，這可能會導致潛在的皮膚問題。
請勿在眼部周圍接觸鏡面，這可能會導致眼部皮膚問題。

1. 清潔面部並配合美肌精華素使用，使用時，保持面部濕潤。
2. 長按電源/電流強度鍵啟動設備。
3. 選擇合適的電流強度(強, 中, 弱)三個 LEVEL、振動模式和顏色模式。
(長按選擇LED 3 秒關閉默認開啟的振動模式)
4. 將設備放在臉上，輕輕按摩皮膚。(如下圖)

面部護理 (10 分鐘)

1. 從下巴開始輕輕向上移動 (沿箭頭方向)
2. 沿下巴到口角，鼻側



3. 從眉毛到髮際線輕輕向上移動。(如圖顯示)



使用方法

頸部護理 (5 分鐘)

頸部護理期間，請勿將其放在喉嚨位置，否則可能會造成傷

1. 從鎖骨到下巴向上移動
2. 沿著鎖骨輕輕左及右兩邊移動。



眼部護理 (2分鐘)

1. 從眼頭到外眼角
2. 沿著眼瞼從下往上



警告事項

請勿在同一位置長時間連續使用設備，這可能會導致潛在的皮膚問題。
請勿在眼部周圍接觸鏡面，這可能會導致眼部皮膚問題。

1. 清潔面部並塗抹護膚品，保持面部濕潤。
2. 長按電源/電流強度鍵啟動設備。
3. 選擇合適的電流強度、振動模式和顏色模式。
(長按選擇LED 3 秒關閉默認開啟的振動模式)
4. 將設備放在臉上，輕輕按摩皮膚。